

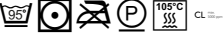


# Návod k použití


## Hyper Foam 2 *clinic* GREENLINE

Matrace pro terapii dekubitů

Před použitím systému si pozorně přečtete návod k použití a dodržujte **varování!**

<b>Jméno výrobku</b>	<b>Hyper Foam 2 <i>clinic</i> GREENLINE</b>
<b>rozsah dodávky</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Matrace pro léčbu dekubitů s pěnovým jádrem</li><li>• PU potah (snímatelný na zip)</li><li>•  Návod k použití (V06), další jazyky návodu k použití naleznete zde: <a href="http://manuals.funke-medical.eu">manuals.funke-medical.eu</a></li></ul>
<b>Indikace / oblasti použití</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Profylaxe dekubitů</li><li>• Dekubitová terapie do 4. stupně (Seiler / EPUAP)</li><li>• Ovládnutí bolesti</li><li>• U pacientů s velmi vysokým rizikem dekubitů</li></ul>
<b>Kontraindikace</b>	Neznámý
<b>Přípustná hmotnost/výška pacienta min - max.</b>	0-150 kg
<b>materiál</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Jádro: PU pěna (ECOLAST®)</li><li>• Obal: nosný materiál PES potažený PU</li></ul>
<b>Rozměry</b>	Šířka: 80 - 100 cm; Délka: 190 - 220 cm
<b>Hmotnost produktu</b>	Přibližně 9 kg (90/200 cm)
<b>Číslo podpory (podle § 139 SGB V)</b>	
<b>Zdravotnické zařízení</b>	Třída 1, MDR 2017/745 
<b>Technická bezpečnost / nehořlavost</b>	Zkoušení odolnosti proti plamení podle DIN EN 597 I + II, BS 7175 s 3 betlém 5, BS 7177
<b>Zkoušky toxikologické bezpečnosti / biokompatibility</b>	DIN EN ISO 10993-5, DIN EN ISO 10993-1, DIN EN ISO 10993-10
<b>Varovná upozornění</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Před prvním použitím je nutné provést přípravu systému pro první použití (viz "Příprava systému k použití").</li><li>• Vhodné pro polohovatelné lehací plochy</li><li>• Horní okraj postranic minimálně 22 cm nad nezatíženým horním okrajem matrace</li></ul>
<b>záruka</b>	7 let na funkční vlastnosti pěnového jádra (pro rata záruka)
<b>údržba</b>	Ne
<b>Pokyny k čištění (potah matrace)</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>V zásadě může uživatel/prodeje čistit kryt na vlastní nebezpečí.</b> Lze čistit buď otřením komerčně dostupnými dezinfekčními prostředky vyrobenými z isopropanolu (např. Bacillo) nebo jinými vhodnými produkty uvedenými na DGHM (např. ECOLAB čisticí hadřík Incidin OxyWipe S XL). Dezinfekce otřením chlórem (max. 5000 ppm) je možná. Po dezinfekci otřete vlhkým hadříkem (čistou vodou). Je možné chemicko-tepelné čištění.</li><li>2. <b>Alternativní čištění v institucích:</b> Kryt lze znovu zpracovat autoklávováním v souladu s pokyny RKI. V každém jednotlivém případě (1 + 2) je pak reference připravena k opětovné aplikaci. <b>POZOR: Pokud nelze odstranit viditelné znečištění a/nebo jsou viditelné poškození, musí být kryt zlikvidován v souladu s národními předpisy.</b></li></ol> 
<b>Pokyny k čištění (jádro)</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>V zásadě může pěnové jádro čistit uživatel/prodeje na vlastní odpovědnost.</b> Pěnové jádro bez krytu lze čistit běžně dostupnými čisticími prostředky. Toho lze dosáhnout namočením kontaminovaného místa nebo postříkáním celého pěnového jádra dezinfekčním prostředkem (např. Bacillo) nebo ECOLAB pěnový sprej Incidin OxyFoam S složený z peroxidu vodíku). Poté musí být pěnové jádro vysušeno na vzduchu.</li><li>2. <b>Alternativní čištění v rámci institucí:</b> Pěnové jádro lze znovu zpracovat autoklávováním v souladu s pokyny RKI. V každém jednotlivém případě (1 + 2) je pěnové jádro připraveno k opětovné aplikaci. <b>POZOR: Pokud nelze odstranit viditelné znečištění a/nebo jsou viditelné poškození, musí být kryt zlikvidován v souladu s národními předpisy.</b></li></ol>
<b>Připravte systém k použití</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Výrobek je určen a vhodný pro domácí a institucionální použití.</li><li>2. Vyměte matraci z krabice ihned po obdržení.</li><li>3. Vložte matraci do postele.</li><li>4. Všímněte si potisku na horní straně matrace „THIS SIDE UP“.</li></ol>

RKI = Institut Roberta Kocha; DGHM = Německá společnost pro hygienu a mikrobiologii; Autoklávování = frakcionovaný vakuový proces při 105 stupních C a 55 minutách

 **Výrobci ve smyslu MDR 2017/745**

Funke Medical GmbH Ährenfeld 10 46348 Raesfeld Tel.: +49-2865-266 93 50 Fax: +49-2865-8133 qm@funke-medical.de www.funke-medical.de

Download: 13.06.2023 10:12