



Koupací a sprchové systémy

Caprice

výškově nastavitelná vana

Elektricky nastavitelná výška vany pro usnadnění práce ošetrovatelskému personálu. Vana je kompatibilní s širokou škálou zvedáků, případně je možné zvolit variantu s integrovaným zvedákem.

Výškově nastavitelná
terapeutická vana

od **256 054 Kč** vč. DPH



- ✓ Výškově nastavitelná vana
- ✓ Automatické napuštění
- ✓ Dezinfekční systém
- ✓ Přednastavená teplota vody
- ✓ Digitální bezdotykový směšovací ventil Rada Sense
- ✓ Záložní baterie pro případ výpadku elektrické sítě
- ✓ Jednoduché a intuitivní bezdotykové ovládání
- ✓ Možnost verze s integrovaným zvedákem
- ✓ Digitální regulace teploty s bezpečnostním nastavením maximální/minimální teploty vody

+420 725 323 111

obchod@stamed.cz



stamed

www.stamed.cz

Všeobecné informace

- Konstrukce vany zesílená skleněnými vlákny, leštěný gelový povrch (bílá barva), délka vany 170 cm nebo 190 cm se zarážkou na nohy
- Variabilní nastavení výšky pomocí dvou elektrických 24 V pohonů
- Sprchová hadice s regulátorem průtoků
- Ruční vypouštění s přepadem
- 48 l/min „Rada Sense“ digitální směšovací ventil se zpětnými ventily; zařízení proti opaření; nabízí programovatelné nastavení maximální, minimální a výchozí teploty; automatickou volbu teploty; proplachování a tepelnou dezinfekci s možností protokolování dat. (podle verze)
- Displej se zobrazením teploty vody
- Kompatibilní se zvedáky Reval Topaz (podle délky vany)
- Odpad Ø40 mm se sifonem
- Ovládání s krytím IP66

Technické specifikace

- Max. objem vody (krátká vana) (do přepadu): 240 litrů
- Max. objem vody (dlouhá vana) (do přepadu): 289 litrů
- Rozsah zdvihu vany: 300 mm
- Čas plnění při 3 bar: 4 min 30 s

Doplňkové vybavení

- Č. 7100.10 Transportní vozík
- Č. 7100.40 Dezinfekční ruční sprcha se spouští, nastavením průtoků, sacím zařízením dezinfekčního prostředku s uzavíracím ventilem, 2 l nádrží se zámkem dveří a klíčem
- Č. 7100.20 12 trysek, vířivka s integrovaným ohřevem
- Č. 7100.60 Osvětlení, 4 LED světla, 6 barev
- Č. 7100.70 Aromaterapie
- Č. 7100.80 Hudební terapie (Zařízení Bluetooth)



Ovládání




Opěrka zad (polyuretan)



Watts směšovač



Sence panel

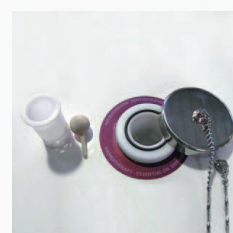


Aroma-spa rozšíření



Audio-spa rozšíření



Vířivka
Hydro-spa rozšíření

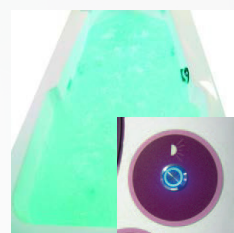

Chromotherapy
Color-spa rozšíření

Ceník (ceny jsou uvedeny vč. DPH)

Caprice vana bez zvedáku

	kód	
Caprice výškově nastavitelná vana, 170cm, pravá.....	7100.1GS70	256 054 Kč
Caprice výškově nastavitelná vana, 170cm, levá.....	7100.1DS70	256 054 Kč
Caprice výškově nastavitelná vana, 190cm, pravá.....	7100.1GS90	271 766 Kč
Caprice výškově nastavitelná vana, 190cm, levá.....	7100.1DS90	271 766 Kč

Příslušenství

Integrovaný dezinfekční systém.....	7100.40	22 709 Kč
Hydro-spa rozšíření	7100.20	117 498 Kč
Color-spa rozšíření.....	7100.60	44 932 Kč
Aroma-spa rozšíření	7100.70	49 468 Kč
Audio-spa rozšíření.....	4500.80	66 670 Kč



Varianta
s integ. zvedákem



Převážný vozík



Dezinfekční systém

REVAL

stamed

www.stamed.cz