

Uživatelská příručka FALCON

Děkujeme, že jste si vybrali naše evakuační křeslo.

Účel a rozsah použití evakuačního křesla

Evakuační křeslo bylo navrženo pro přepravu sedících osob po schodech a na rovném povrchu. Je určeno pouze pro použití vhodně vyškolenou a kompetentní obsluhou, která pomáhá při bezpečné evakuaci osob se sníženou pohyblivostí. Umožňuje přepravu osob z budovy v nouzových situacích nebo v případech, kdy není možné použít výtahy.

Vlastník, správce budovy nebo skutečný majitel budovy musí zajistit potřebné evakuační postupy, vyškolený personál a pravidelné kontroly a údržbu židlí, aby byla zaručena bezpečná evakuace všech uživatelů z objektu v případě ohrožení života nebo zdraví před příjezdem záchranných složek.

Před použitím nouzového křesla si nezapomeňte přečíst příručku, která obsahuje obecné informace o používání, provozu a údržbě evakuačního křesla. Všechna ostatní bezpečnostní opatření přijatá uživateli a provozovateli zařízení by měla zohledňovat platné vnitrostátní předpisy a normy. Bezpečné a správné používání tohoto zařízení je výhradně na provozovateli.

Tento návod si uschovejte pro budoucí použití, další kopie jsou k dispozici na vyžádání.

Datum vydání příručky: 30/07/2021

Datum aktualizace příručky: 20/12/2021

Číslo verze: FALCON IOF.1.2

Český překlad: 19/01/2024



POLSKO
Krakowska 390
32-080 Zabierzów - Kraków DIČ:
9452220992



www.ensafe-chair.com

office@ensafe-chair.com
+ 48 791 400 552



Evakuační křeslo se dodává včetně:

- držáky pro montáž na stěnu - 1 sada
- zkrácená verze návodu k obsluze na zadní straně opěrky hlavy.
- úplná uživatelská příručka
- ochranný kryt (volitelný)

Po obdržení evakuačního křesla jej vyjměte z obalu a připevněte montážní držáky ke stěně, zavěste křeslo na držáky.

Před použitím židle proveďte vizuální kontrolu a ujistěte se, že:

- Obsah je kompletní, jak je popsáno výše
- Židle nebyla během přepravy poškozena
- Sedadlo, opěrka hlavy a rám jsou kompletní a v dobrém stavu.
- Všechny matice a šrouby jsou připevněny
- Všechna kola fungují správně
- Správná funkce hlavového a bederního pásu
- Mechanismy se v případě potřeby snadno otevírají, zavírají a uvádějí v činnost.
- Otevření vodicích mechanismů
- Vodicí pásy se otáčejí

Záruka

Pokud je evakuační křeslo kontrolováno a servisováno alespoň jednou ročně (je vyžadována dokumentace o kontrole), pak má pětiletou záruku na vadné materiály a zpracování. Záruka se nevztahuje na díly, které podléhají opotřebení nebo mechanickému poškození nebo jsou důsledkem vandalismu či nesprávného používání. Výše uvedená doporučení jsou standardními podmínkami. Na individuálně sjednané podmínky se vztahují ustanovení smlouvy mezi stranami.

Montáž na stěnu

Židle by měla být připevněna na stěnu na vhodném místě v souladu s vypracovanými požárně bezpečnostními pokyny nebo požárním auditem.

Doporučujeme připevnit židli na stěnu v dostatečné výšce, aby bylo možné čistit podlahu bez nutnosti sundávat židli ze stěny. Dodané držáky by měly být připevněny ke stěně ve vzdálenosti přibližně 300 mm mezi sebou.

V zavřené poloze židle se horní část kolejnic přichytí k podpěrám. Pokud se židle nepoužívá, musí být nasazen ochranný kryt.



Obecné bezpečnostní informace

- Evakuační křeslo by měla používat pouze řádně vyškolená a kompetentní obsluha, obsluha by měla v tomto ohledu absolvovat pravidelné školení (doporučujeme alespoň jednou ročně).
- Používejte evakuační křeslo k určenému účelu.
- Nikdy nepřekračujte maximální nosnost 210 kg
- Obsluha nesmí nikdy nechat uživatele na židli bez dozoru.
- Obsluha při sestupu ze schodů nikdy nesmí židli pustit.
- Obsluha se musí vyvarovat prudkých pohybů židle, protože by mohlo dojít ke zranění evakuované osoby.
- Pravidelné kontroly a údržbu nouzového křesla by měly provádět pouze kompetentní osoby se znalostí jeho konstrukce.

Evakuační křeslo může obsluhovat jedna osoba, ale doporučuje se obsluha dvěma osobami, zejména pokud je uživatel výrazně těžší než obsluha.

Všichni operátoři by měli projít školením, které provádí autorizovaný školitel - výrobce, operátoři musí být fyzicky a psychicky zdatní, nosit vhodnou obuv a oděv, být připraveni ovládat křeslo v případě nouze, znát a rozumět evakuačním postupům a plánům.

Základní prvky evakuačního křesla



Výrobce:	EnSafe Ltd.
Model:	FALCON
Maximální kapacita:	Max. nosnost: 210 kg
Konstrukce:	Hliník / ocel

1. Teleskopická výsuvná rukojeť

Umožňuje nastavit vhodnou výšku rukojetí v závislosti na výšce obsluhy.

2. Snadno dostupné instrukce

Stručný návod k obsluze je umístěn na zadní straně opěrky hlavy a je pro obsluhu vždy viditelný.

3. Skládací madla

Používají se při horizontální evakuaci/přemístění.

4. Bezpečnostní pásy

K zajištění bezpečnosti evakuované osoby se používají dvě řady pásů. Volitelně lze židli vybavit přídatným popruhem na nohy.

5. Opěrka nohou s blokádou sjezdu

Opěrka nohou s integrovanou blokádou náhodného sjezdu.

6. Madla pro přenášení

Židle je vybavena madly pro přenášení.

7. Loketní opěrky

Židle může být volitelně vybavena opěrkami.



POLSKO
Krakowska 390
32-080 Zabierzów - Kraków DIČ:
9452220992




www.ensafe-chair.com

office@ensafe-chair.com
+ 48 791 400 552


Příprava evakuačního křesla FALCON k použití



Evakuace ze schodů dolu

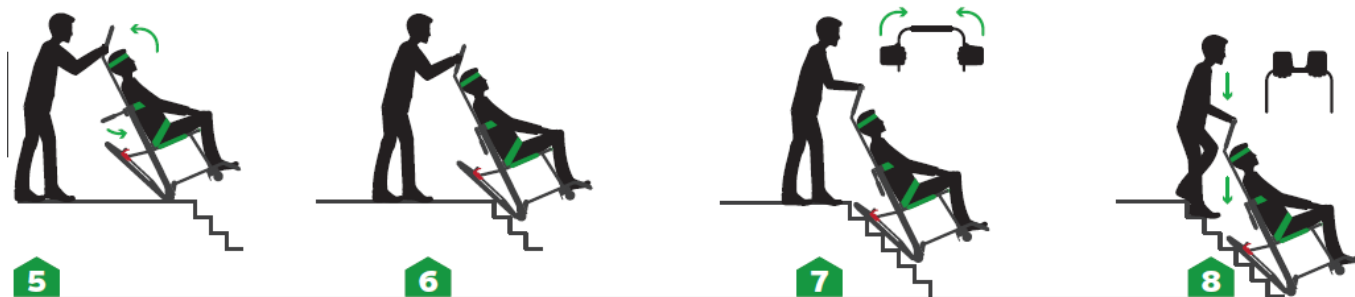

Horizontální evakuace

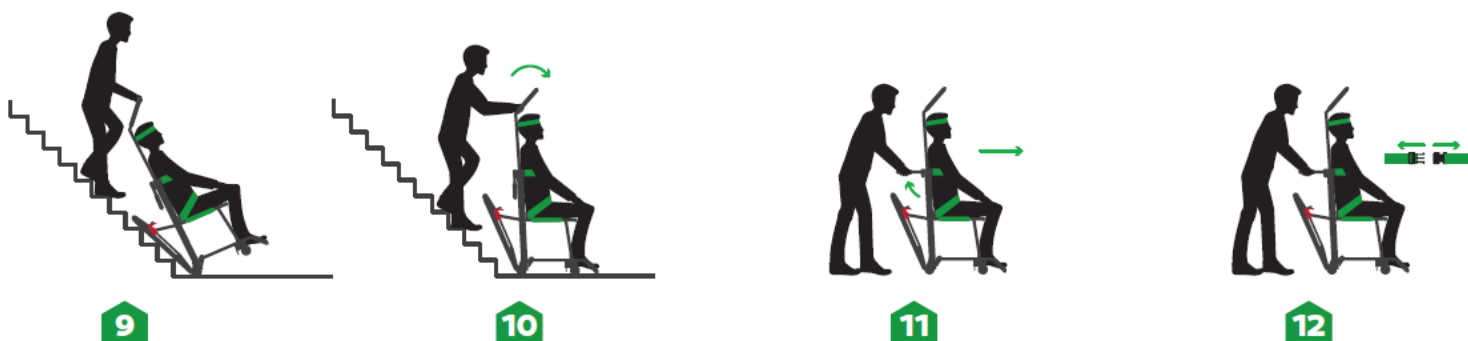

Další informace

Každý závažný incident, ke kterému došlo v souvislosti s tímto prostředkem, by měl být nahlášen výrobcí a předsedovi Úřadu pro registraci léčivých přípravků, zdravotnických prostředků a biocidních přípravků (v případě incidentů na území Polské republiky).

Hlášení o zdravotním incidentu a kopii hlášení o zdravotním incidentu je třeba zaslat předsedovi Úřadu e-mailem (adresa: incydenty@urpl.gov.pl), faxem (č. +48 22 492 11 29), doporučenou poštou nebo kurýrem (Al. Jerozolimskie 181c, 02- 222 Varšava).

Zdravotní příhoda se hlásí na formuláři pro hlášení zdravotních příhod.

Definice:

1. "Závažným incidentem" se rozumí jakýkoli incident, který přímo nebo nepřímo vedl, mohl vést nebo mohl vést k některé z následujících situací:

(a) úmrtí pacienta, uživatele nebo jiné osoby,

(b) dočasné nebo trvalé vážné zhoršení zdravotního stavu pacienta, uživatele nebo jiné osoby;

c) vážné ohrožení veřejného zdraví;

2. "Vážným ohrožením veřejného zdraví" se rozumí událost, která může mít za následek bezprostřední riziko úmrtí, vážné zhoršení zdravotního stavu osob nebo závažné onemocnění, které může vyžadovat naléhavá nápravná opatření a které může mít za následek významnou nemocnost nebo úmrtnost lidí, nebo něco neobvyklého či neočekávaného. v daném místě a čase.

Výrobce evakuačních křesel: EnSafe Sp.z o. o., Polsko

Obchodní název výrobku, model: Název výrobku: evakuační křeslo, Falcon

Země původu Polsko

Informace o výrobku:

- Zdravotnický prostředek třídy I v souladu se zásadou 1 přílohy VIII nařízení o zdravotnických prostředcích (EU) 2017/745.



POLSKO
Krakowska 390
32-080 Zabierzów - Kraków DIČ:
9452220992



www.ensafe-chair.com

office@ensafe-chair.com
+ 48 791 400 552

Kontakt:

Distributor: Stamed s.r.o.

Vřesová 667

330 08 Zruč – Senec

Česká Republika

obchod@stamed.cz

Výrobce: EnSafe Ltd.

Krakowska 390

32-080 Zabierzów - Kraków

POLSKO

office@ensafe-chair.com

**Skenujte mě!**

POLSKO
Krakowska 390
32-080 Zabierzów - Kraków DIČ:
9452220992



www.ensafe-chair.com

office@ensafe-chair.com
+ 48 791 400 552